


LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ; CONSERVEZ-LE POUR VOUS EN RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

⚠ RISQUE DE BRÛLURE CORPORELLE : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Une utilisation prolongée ou inadéquate des ceintures de massage chauffantes peut entraîner des brûlures thermiques, même à des températures relativement basses. En interrompre l'utilisation si la chaleur vous cause de l'inconfort. Toujours mettre l'appareil hors tension si la chaleur devient inconfortable. Commencez toujours par le réglage le plus bas. **NE PAS APPLIQUER DIRECTEMENT SUR LA PEAU. NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN DORMANT.**

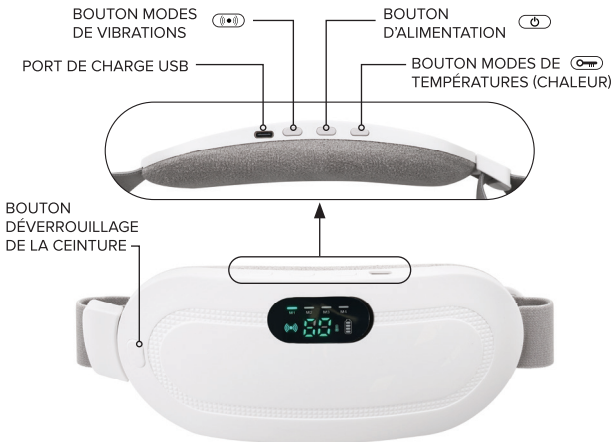

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie rechargeable intégrée au Lithium d'une puissance de 2 500 mAh
- Dimensions : 185 x 85 x 25 mm (7.28" x 3.35" x 0.98")
- Câble de charge USB inclus
- Matières : ABS, microfibre satinée

ALIMENTATION : MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)

Pour mettre l'appareil sous ou hors tension (ON ou OFF), exercez une longue pression sur le bouton d'alimentation.

L'appareil est hors tension lorsque les DELs sont éteintes sur le cadran lumineux.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

- Première pression – le voyant de la chaleur s'allume – 60 °C (140°F)
- Seconde pression – 55 °C (131°F)
- Troisième pression – 50 °C (122°F)
- Quatrième pression – l'option chaleur est hors tension (OFF)

SÉLECTION DU MODE « VIBRATION »

Les modes de vibration varient, allant d'un massage continu léger à un massage par pulsations, pour un soulagement adapté à vos besoins.

- Première pression – le voyant « Vibration » s'allume – M1 : Mode de pulsation triple
- Deuxième pression – M2 : Mode de pulsation rapide
- Troisième pression – M3 : Mode de pulsation continue
- Quatrième pression – M4 : Mode de pulsation triple lente
- Cinquième pression – Mode de vibration hors tension (OFF)

CHARGE DE L'APPAREIL

Branchez le câble de charge USB, type C, au port USB de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité du câble USB standard à un bloc d'alimentation de 5 W ou au port USB d'un ordinateur.

Débranchez lorsque la charge est terminée.

Le témoin de charge clignote pendant que l'appareil se charge et redevient fixe lorsque la charge est terminée.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas maintenir à portée des enfants et des animaux domestiques.
- Consultez votre professionnel de la santé avant l'utilisation de cet appareil, et ce, si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, si vous souffrez d'une déficience sensorielle ou de problèmes de peau particuliers.
- Limitez l'intensité et la durée de chaleur (haute température) afin d'éviter brûlures et irritation de la peau.
- Ne convient pas aux personnes ayant certains problèmes de santé (par ex. problèmes sensoriels, déficience ou problème de peau), sans demander au préalable un avis médical.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau abîmée (contusions, irritation ou inflammation).
- Ne pas charger l'appareil à l'aide d'un chargeur haute vitesse. Utilisez une connexion standard de 5 W.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas l'exposer à la chaleur ou l'humidité.
- Ne pas le plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas essayer de le réparer, il ne contient aucune pièce réparable.

- Débranchez-le une fois la charge complète ou avant de le nettoyer, et ce, avec un chiffon sec.
- Ne pas exercer une forte pression.

GARANTIE

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.

RELAXUS

WEARABLE COMFORT.

Period.
CONFORT À VOTRE PORTÉE.

702658

**PORTABLE HEAT BELT
DURING YOUR MONTHLY CYCLE**

**CEINTURE PORTATIVE
POUR DOULEURS MENSTRUELLES**




**MANUAL
MODE D'EMPLOI**

READ MANUAL CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

⚠ RISK OF SKIN BURNS: WHAT YOU NEED TO KNOW

Prolonged or improper use of heating massager belts can lead to thermal burns—even at relatively low temperatures. Discontinue use if heat causes any discomfort. Always turn off the unit if the heat becomes uncomfortable. Always start at the lowest setting. **DO NOT APPLY DIRECTLY TO BARE SKIN. DO NOT USE WHILE SLEEPING.**

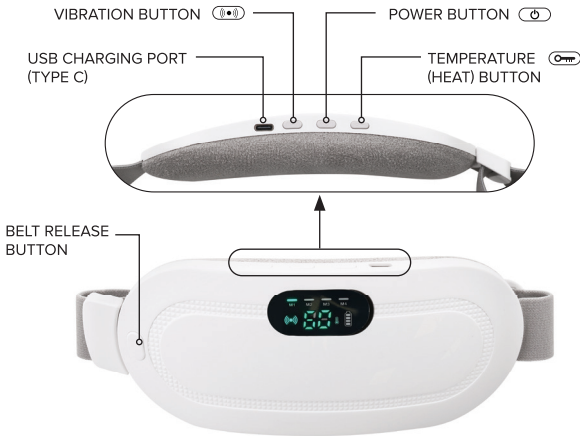

SPECIFICATIONS

- Built-in rechargeable lithium 2500mAh battery
- Size: 185 x 85 x 25 mm (7.28" x 3.35" x 0.98")
- Includes USB charging cable
- Material: ABS, Velvet Microfibre

POWER ON/OFF

Press and hold down the power button to turn the unit ON or OFF. Unit is powered OFF when no LEDs are lit up on the readout.

TEMPERATURE SELECTION

- Press once – Temperature icon will light up – 60°C (140°F)
- Press a 2nd time – 55 °C (131°F)
- Press a 3rd time – 50°C (122°F)
- Press a 4th time – Turn heat function OFF

VIBRATION SELECTION

The vibration modes range from continuous gentle massage to pulsing vibrations for customizable relief.

- Press once – Vibration icon will light up – M1: Triple Pulse Mode
- Press a 2nd time – M2: Rapid Pulse Mode
- Press a 3rd time – M3: Continuous Mode
- Press a 4th time – M4: Slow Triple Pulse Mode
- Press a 5th time – Turn vibration function OFF

CHARGING

Plug in the USB Type C connection on the charging cable to the charging port on the unit. Connect the standard USB end into a 5W charging block or plug into a matching computer USB outlet.

Disconnect when charging is complete.

Battery indicator flashes red during charging. Indicator is solid red when charging is complete.

⚠ WARNINGS

- Keep out of reach of children and pets.
- Consult your healthcare provider before use if you are pregnant, suspect you may be pregnant, have sensory impairments, or specific skin conditions.
- Avoid prolonged high heat to prevent skin irritation or burns.
- Not suitable for people with certain conditions (e.g., sensory impairments or specific skin conditions) without medical advice.
- Avoid use on broken, irritated, or inflamed skin.
- Do not charge with a high speed charger. Use only a standard 5W charging connection.
- Do not wrap the cord around the product.
- Keep this product away from exposure to heat or moisture.
- Do not immerse in water or other liquid.
- Do not attempt repair. This unit contains no serviceable parts.
- Disconnect power when charging is complete or before cleaning the unit with a dry cloth.
- Do not apply excessive pressure.

1 YEAR WARRANTY

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:

1. Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents.
3. Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar model. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.

Distributed by Relaxus Products Ltd
1590 Powell Street,
Vancouver, BC, V5L1H3
Canada

Made in China / Fabriqué en Chine